



Stylo [®] MESOpower MS-

Le tout dernier système de thérapie cutanée !


mesoskinline

mesoskinline

mesoskinline ApS

Juelsmindevej 57

DK-7120 Vejle

Danemark

(+45) 71 74 11 08

sales@mesoskinline.com

www.mesoskinline.com

®-pen MESOpower MS-5000

Le tout dernier système de thérapie cutanée !

Caractéristiques

- ®-pen MESOpower électrique avec modules d'aiguilles stériles à usage unique
- Conception ergonomique et marquage CE
- Longueur des aiguilles : de 0,25 mm à 1,0 mm
- Nombre d'aiguilles : 3/11/24/36 aiguilles par module
- Adaptateur : 5 V, 1 000 mA
- Vitesse : max. 300 piqûres/seconde
- Comprend deux batteries lithium rechargeables, un chargeur, un support pour stylo, un étui portable en aluminium et 40 modules d'aiguilles

Caractéristiques

- Régulation automatique de la vitesse par simple clic (100 - 300 impulsions/seconde)
- Différents modules d'aiguilles pour stimuler la peau : pour traiter les ridules, les cicatrices ou les zones étendues
- Les vibrations et le micro-aiguillage doux créent une biostimulation parfaite de la peau, qui absorbe immédiatement les produits anti-âge pendant le traitement, sans traumatisme majeur.
- Pas de temps d'arrêt ni d'ecchymoses.
- Amélioration de plus de 50 % des vergetures et des cicatrices d'acné.
- Aucune anesthésie à la lidocaïne nécessaire.
- Le traitement non traumatisant permet d'effectuer chaque traitement individuel à seulement 10-14 jours d'intervalle.

Garantie

- Garantie d'un an.

Contenu

- 1 x stylo MESOpower MS-5000
- 2 x modules de batterie rechargeables
- 1 x adaptateur pour connexion filaire
- 1 x câble d'alimentation
- 1 x support de stylo pour table
- 1 x Manuel d'utilisation en anglais
- 10 modules d'aiguilles de microneedling à 3 points, stériles
- 10 modules d'aiguilles de microneedling à 11 points, stériles
- 10 modules d'aiguilles de microneedling à 36 points, stériles
- 10 modules en plastique pour microlifting à 24 points, stériles
- **Le tout emballé dans une élégante valise portable en aluminium**

Référence : MST2000

Stylo d'® MESOpower avec et sans fil 2 EN 1

Conçu par mesoskinline au Danemark

- Longueur des aiguilles : 0,25 mm - 1,0 mm
- 18 000 coups par minute (jusqu'à 300 coups par seconde)
- Deux piles au lithium (autonomie de 6 heures à pleine charge)

Innovation 3D

Le stylo MESOpower® est un appareil professionnel spécialement conçu pour la mésothérapie, doté d'un design ergonomique. Il s'adapte à plusieurs utilisateurs, dispose d'un affichage en temps réel de l'énergie et d'une double technologie innovante avec mémoire intelligente pour répondre à vos caractéristiques d'utilisation.

Le stylo MESOpower® est idéal pour une gamme de traitements anti-âge, où des sérums/mésococktails sont appliqués à l'aide de mouvements de pression douce et de vibrations. Ceux-ci comprennent :

- Mésothérapie non invasive
- Microneedling
- Microlifting

Sans fil et pratique

Cette pièce à main professionnelle peut également être utilisée sans fil, ce qui constitue un avantage notable pour tous les thérapeutes du monde entier. Transportez votre équipement dans une élégante mallette en aluminium vers le lieu de votre choix pour effectuer le traitement : clinique, centre de spa, salon professionnel.

Vous effectuez de nombreux traitements par jour ? Pas de souci : la batterie peut être rechargée pendant que vous travaillez. Une fois complètement chargée (max. 2 heures), elle offre jusqu'à 6 heures d'autonomie en continu.

Sûr et efficace

Quel que soit le pays, le stylo d'® s MESOpower répond à toutes les réglementations et exigences en matière de longueur d'aiguille. Cela signifie qu'il peut être utilisé en toute sécurité sur le visage et le corps, où vous pouvez régler la longueur de l'aiguille de 0,25 mm à 1,0 mm en fonction des zones et de l'objectif du traitement.

Le module d'aiguilles est de taille idéale et pratique pour le traitement de zones étroites telles que le nez, le contour des yeux ou de la bouche.

Afin d'effectuer un traitement confortable et adapté à tous les types de peau, à l'épaisseur et à la sensibilité de la peau, la vitesse de vibration peut être réglée sur 6 niveaux. Sa vitesse peut être réglée de 100 à 300 coups/seconde.

Chaque module d'aiguilles est stérile et emballé individuellement. Les aiguilles du module sont recouvertes d'un capuchon de protection en plastique amovible, ce qui évite tout risque de contamination lors du déballage ou de la mise au rebut du module d'aiguilles.

Entraînement individuel 3D

Le stylo MESOpower® se compose de 3 systèmes d'entraînement individuels. Ceux-ci offrent une triple protection des composants essentiels, empêchent toute contamination de l'équipement, évitent la surchauffe de la pièce à main et maintiennent un niveau de vibration parfait.

Technologie du stylo d'® MESOpower

Le stylo d'® MESOpower est le tout dernier développement du groupe de stylos de microneedling à travers le monde.

La technologie a évolué et remplace l'utilisation des rouleaux à aiguilles, qui sont des outils cylindriques recouverts de petites aiguilles et roulés sur la peau pour provoquer des micro-lésions. Il existe d'autres produits similaires sur le marché, notamment le SkinPen ou le Dermalpen, mais tous reposent sur le même principe : provoquer des lésions cutanées contrôlées et uniformes afin de stimuler le renouvellement de la peau.

Le stylo MESOpower® peut même traiter les zones très délicates, impossibles à traiter avec un rouleau à aiguilles. Lors d'un traitement anti-âge avec le stylo MESOpower®, maintenez-le à la verticale contre la peau et réglez la profondeur et la vitesse des aiguilles de l'appareil en fonction de la zone et du type de peau à traiter.

Un module nano à 3 points spécial pour le microneedling Meso, pour un traitement précis des rides profondes et des rides d'expression.

Le module innovant 3-Point - Microneedling est l'appareil de microneedling clinique le plus avancé du marché. Grâce à ce module à la pointe de la technologie, vous pouvez stimuler et ouvrir la couche supérieure de la peau. Utilisez-le avec les cocktails Suita-ble Mesoskinline ou des produits similaires.

Le module se compose de trois micro-aiguilles sûres qui stimulent la couche supérieure de la peau (épiderme) de manière douce et efficace. Sa petite taille et sa plaque à aiguilles inclinable permettent également d'accéder facilement aux zones difficiles.

Double effet avec le module MESO 3-Point Nano

Les aiguilles créent des trous microscopiques invisibles qui activent le processus naturel de guérison de la peau, produisant ainsi davantage de collagène et d'élastine. Cela augmente naturellement la résilience de la peau.

Parallèlement, les méso-cocktails mesoskinline pénètrent dans la peau pendant le traitement et non après (contrairement à de nombreuses autres applications de micro-aiguillage). La peau absorbe ainsi de manière optimale toutes les vitamines et tous les acides aminés contenus dans les produits, tout en se renouvelant.

Cela améliore le résultat du traitement d'environ 30 % et permet une absorption optimale des principes actifs en quantités adéquates et dans les couches cutanées appropriées.

La barrière cutanée étant ouverte aux ingrédients actifs anti-âge, les ingrédients actifs supplémentaires contenus dans le MASQUE MESO ANTI-AGE utilisé après le traitement sont absorbés plus efficacement.

Pour les rides d'expression (pour les peaux fines et les zones sensibles). Une tête de microneedling ronde classique pour un traitement efficace de rajeunissement de la peau.

Le module innovant MESO 11-Point Micro est l'un des modules d'aiguilles les plus sûrs et les plus efficaces du marché. Ce module avancé vous permet de stimuler, d'activer et d'ouvrir les couches supérieures de la peau. Grâce à la distance appropriée entre les aiguilles, la peau est traitée correctement, sans risque de cicatrices.

Utilisez ce module d'aiguilles sur les rides d'expression, les vergetures ou les cicatrices d'acné avec les cocktails Mesoskinline appropriés ou des produits similaires.

Mode d'emploi :

Ouvrez l'emballage stérile et retirez le module. Ne touchez pas les aiguilles. Tournez le module dans la pièce à main Meso Power jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, puis retirez le capuchon de sécurité en plastique des aiguilles.

Maintenez le bouton « Turn on » (Allumer) de la pièce à main enfoncé pendant 2 secondes pour l'activer, puis réglez la longueur des aiguilles en tournant la pièce à main. Vous pouvez modifier la vitesse des aiguilles (coups par seconde) en appuyant une seule fois sur le bouton « Turn on » (Allumer).

bouton « Turn on ».

Vous êtes maintenant prêt à commencer le traitement. Traitez la peau avec des mouvements perpendiculaires et maintenez un angle de 90° afin de garantir une profondeur d'aiguille uniforme et de ne causer que des lésions cutanées minimes.

Attention :

Les zones suivantes ne peuvent être traitées avec aucun type d'aiguille : plaies ouvertes, acné active, peau irritée, eczéma, cancer de la peau, grains de beauté !

Module MESO 3 points Nano

(Pour stylo d'® s MESOpower) Référence :

MST3004



Description du produit (1 boîte) :

- 10 modules d'aiguilles emballés individuellement
- Stérile et à usage unique
- Ultrafin 0,18 mm
- Acier inoxydable au titane
- Stérilisé aux rayons gamma et jetable
- Date de fabrication, date d'expiration et numéro de lot sur chaque aiguille
- Longueur des aiguilles réglable (0,25 mm-1 mm)

Grâce à des microperforations dans la peau, les micro-aiguilles insèrent les principes actifs anti-âge (mesococktails Mesoskinline) pour un renouvellement cellulaire naturel et presque indolore.

Le renouvellement cellulaire après un traitement mésothérapeutique par micro-aiguilles rend la peau plus ferme, améliore son apparence et réduit les rides et les imperfections mineures.

Micro-module MESO 11 points

(Pour stylo d'® s MESOpower) Référence :

MST3003



Description du produit (1 boîte) :

- 10 modules d'aiguilles emballés individuellement
- Stériles et à usage unique
- Ultrafin 0,18 mm
- Acier inoxydable au titane
- Stérilisés aux rayons gamma et jetables
- Date de fabrication, date d'expiration et numéro de lot sur chaque aiguille
- Longueur des aiguilles réglable (0,25 mm-1 mm)

Les micro-aiguilles introduisent les principes actifs anti-âge (mesococktails Mesoskinline) à travers des micro-perforations dans la peau et assurent un renouvellement cellulaire naturel et presque indolore.

Module d'aiguilles en plastique sûr, conçu pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique et augmenter la pénétration du produit dans la peau jusqu'à 97 %.

Avec le module non traumatique MESO 24 points, vous pouvez traiter efficacement toutes les zones de la peau avec de l'acide hyaluronique ou des mésococktails Mesoskinline.

Le module non traumatique MESO 24 points innovant se compose d'une plaque en plastique avec 24 points de stimulation (0,7 mm) qui activent la couche supérieure de la peau (épiderme) de manière douce et efficace.

Il s'agit d'un module spécial pour la mésothérapie non invasive, utilisé pour le visage, le corps et le cuir chevelu. Les 24 points de stimulation absorbent les mésococktails actifs mesoskinline dans la peau, ce qui entraîne un renouvellement cellulaire naturel.

Lorsque vous passez le module MESO 24 points non traumatique sur la peau, vous activez le processus naturel de guérison de la peau. Au cours de ce processus, davantage de collagène et d'élastine se forment, rendant la peau plus résistante. La peau est ainsi plus réceptive aux ingrédients anti-âge ajoutés dans les différents mero-cocktails mesoskinline.

Le traitement de la peau avec le module MESO 24 points non traumatique ne nécessite pas d'anesthésie et ne provoque pas de cicatrisation visible ni de formation de croûtes, ce qui élimine tout risque de cicatrices ou de lésions cutanées. Même les peaux sensibles tolèrent le traitement de mésothérapie non invasif avec ce module.

Le module 36 points est le plus grand de la gamme et convient au traitement des rides profondes, des vergetures, des cicatrices chirurgicales et d'acné.

Le module innovant MESO 36 points Maxi est l'appareil clinique le plus avancé du marché. Grâce à ce module de pointe, vous pouvez stimuler et ouvrir la couche supérieure de la peau. Utilisez-le avec les cocktails Mesoskinline adaptés ou des produits similaires.

Le module se compose de trente-six micro-aiguilles sûres qui stimulent la couche supérieure de la peau (épiderme) de manière douce et efficace et permettent d'accéder facilement aux zones difficiles grâce à leur petite taille.

Action du module d'aiguilles :

Les modules d'aiguilles Mesoskinline comprennent des modules de toutes sortes, du minuscule module Nano 3 points au module Maxi 36 points.


Le nombre d'aiguilles dépend de la zone à traiter et permet au thérapeute d'effectuer le traitement le plus précis et le plus adapté possible.

Des aiguilles très fines en acier titane de Ø 0,18 mm, associées à un cocktail méso anti-âge, nourrissent la peau avec les ingrédients sains nécessaires et activent la production de collagène grâce aux micro-lésions de la peau.

Il peut perforer plus de 300 000 microvaisseaux de l'épiderme en cinq minutes, créant ainsi un système efficace de diffusion des nutriments entre l'épiderme et le tissu sous-cutané.

Module non traumatique MESO 24 points

(Pour stylo d'® s MESOpower) Référence : MST2002

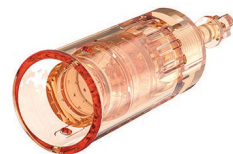


Description du produit (1 boîte) :

- 10 modules d'aiguilles emballés individuellement
- Stériles et à usage unique
- Module spécialement conçu avec 24 points de stimulation en plastique en forme de pyramide de 0,7 mm
- Stérilisé aux rayons gamma et jetable
- Date de fabrication, date d'expiration et numéro de lot sur chaque aiguille
- Longueur des aiguilles réglable (0,25 mm-0,7 mm)

Le renouvellement cellulaire après un traitement de mésothérapie non invasive permet d'obtenir une peau plus ferme, une amélioration de l'aspect de la peau, une réduction des rides et des imperfections mineures, ainsi qu'une activation de la circulation sanguine autour des follicules pileux après une mésothérapie contre la chute des cheveux.

Module Maxi MESO 36 points

(Pour stylo d'® s MESOpower) Référence :

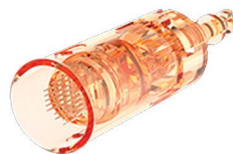

Description du produit (1 boîte) :

- 10 modules d'aiguilles emballés individuellement
- Stériles et à usage unique
- Ultra-fins 0,18 mm
- Acier inoxydable titane
- Stérilisés aux rayons gamma et jetables
- Date de fabrication, date d'expiration et numéro de lot sur chaque aiguille
- Longueur des aiguilles réglable (0,25 mm-1 mm)

Grâce à des microperforations dans la peau, les micro-aiguilles insèrent les principes actifs anti-âge (meso-cocktails Mesoskinline) pour un renouvellement cellulaire naturel et presque indolore.

Le renouvellement cellulaire après un traitement mésothérapeutique par micro-aiguilles rend la peau plus ferme, améliore son apparence et réduit les rides et les imperfections mineures.