

RF MICRONEEDLING

RAJEUNIT ET DENSIFIE LA PEAU

Fonctionnement:


De manière contrôlée et précise en fonction de la zone de traitement, de fines aiguilles plaquées or combinées à de la radiofréquence vont pénétrer et chauffer la peau pour stimuler le collagène naturel et l'élastine dans la peau.

Traitements:

- ✓ Vieillessement de la peau, rides ou ridules.
- ✓ Relâchement cutané du visage ou du cou.
- ✓ Pores dilatés, couperose.
- ✓ Cicatrices d'acné, excès de sébum.
- ✓ Vergetures récentes ou anciennes, cicatrices visage ou corps.



Avantages:

- ✓ Contrairement au laser ou à la dermabrasion, cette technique peut être utilisée à toutes les périodes de l'année.
- ✓ Le système d'aspiration de la pièce à main permet un contact aisé sur les zones les plus délicates de la peau comme le contour des yeux.
- ✓ Les aiguilles pénètrent doucement sans aucun choc ne provoquant aucun saignement ni aucune douleur après le soin.
- ✓ Le réglage de la pénétration des aiguilles par unité de 0,2 mm va permettre de personnaliser au mieux le soin en fonction de la qualité de la peau.
- ✓ Les aiguilles recouvertes d'or, sont à la fois solides et biocompatibles. Fines, elles permettent une pénétration rapide et facile dans la peau.
- ✓ Les aiguilles sont jetables et stériles.
- ✓ L'opérateur peut rapidement remarquer la libération de l'énergie grâce à la lumière LED.

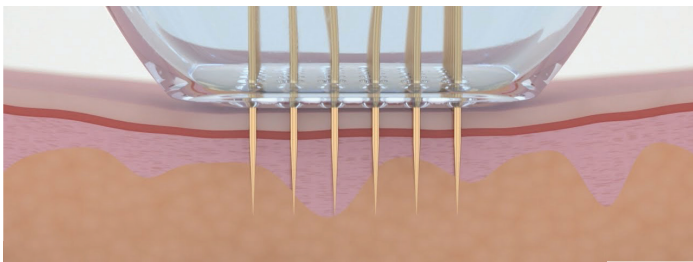


**RESULTATS
RAPIDES**




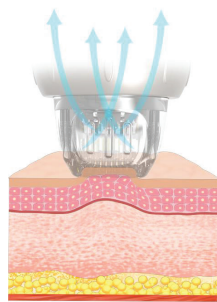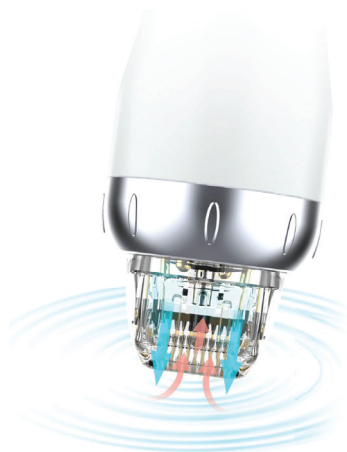


Saisi
Automatiquement
la Peau

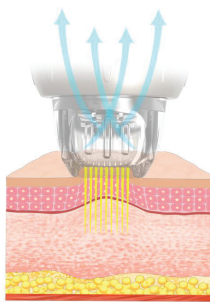

Crée un Canal

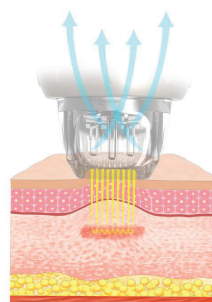


Libère le Vide
et L'aiguille

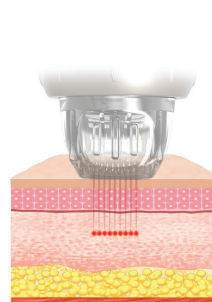

Et Voilà

Micro-Aiguilles RF


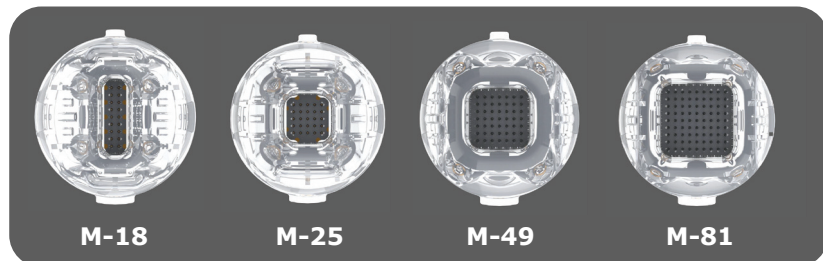


RF Fractionnée




Mono/Bipolaire

- ✓ En mode bipolaire, 50% des aiguilles sont positives et les autres 50% sont d'une polarité négative. En conséquence, l'énergie agit uniquement sur la profondeur de l'aiguille. Ce mode est plus adapté au traitement du visage.
- ✓ En mode monopolaire, toutes les aiguilles sur l'extrémité sont d'une polarité positive. Le client doit tenir la sonde de polarité négative dans sa main au cours du traitement. L'énergie RF peut pénétrer en profondeur dans la peau plutôt qu'en mode bipolaire. Cela convient donc mieux pour le traitement du corps.

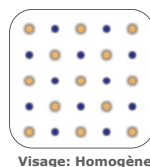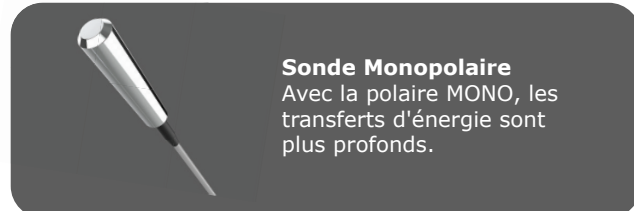

Visage: Homogène

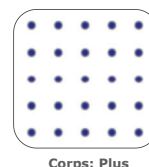

Corps: Plus Profondément

- ÉLECTRODE POSITIVE
- POLE NÉGATIVE

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE D'ENTRÉE	500W
PUISSANCE DE SORTIE	50W
POIGNÉE	Poignée RF fractionnée/Poignée RF Micro-Aiguille
ÉCRAN	10.4 inch
FRÉQUENCE	2MHz
ÉNERGIE	1-10 Niveau
DURÉE D'IMPULSIONS	10-900ms
PROFONDEUR DE L'AIGUILLE	0.4-4mm réglable
NIVEAU DE PRESSION DU VIDE	1-4
MODE DE TRAVAIL	SIMPLE/AUTO
TYPE DE SYSTÈME	MONO et BIPOLAIRE
REFROIDISSEMENT	1-3 Niveau (Max -10°C)
CONSEILS	Isolés et Non Isolés
CONSEILS INVASIFS	M-18, M-25, M-49, M-81
CONSEILS NON INVASIFS	F-3*3, F-5*5, F-9*9
ALIMENTATION	50HZ / AC110V±10%10A, 60HZ
DIMENSIONS DE LA MACHINE	42*42*103cm
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	63*46*118cm
POIDS NET	34kg
POIDS BRUT	50kg

